

GEBRUIKS- AANWIJZING

HOE NEEMT U EEN STAAL?

Lees eerst de brief, de folder en deze gebruiksaanwijzing voor u een staal neemt van uw stoelgang.

We vragen u om met de bijgevoegde afnameset een staal van uw stoelgang te nemen. Hoe u een staal neemt leest u hierna of kunt u bekijken in het filmpje op www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker/onderzoek. Zorg dat kinderen niet aan de afnameset kunnen.



Stap 1: Plas eerst en spoel door. Neem de test en het opvangpapier. Het opvangpapier is het witte papier met de groene tekeningen erop.



Stap 2: Leg het opvangpapier op het water in het toilet. Met de tekeningen naar boven.



Stap 3: Het opvangpapier vangt uw stoelgang op. Neem uw staal onmiddellijk.



Stap 4: Strijk met de groefjes over het oppervlak van uw stoelgang tot er stoelgang aan de groefjes kleeft. Meer stoelgang is niet nodig.



Stap 5: Plaats het staafje terug in het flesje. Druk tot u een klik hoort.

Let op: schrijf niets op het flesje.
Let op: open het flesje niet meer nadat u het staafje erin geplaatst hebt.



Stap 6: Steek het flesje terug in het groene zakje. Sluit het zakje. Laat het rechthoekige doekje zitten.

Spoel het opvangpapier samen met de stoelgang door. Het papier is biologisch afbreekbaar.




Stap 7: Vul het antwoordformulier volledig in. Steek het groene zakje met uw stoelgangstaal en het antwoordformulier samen in de bubbelenvelop waarop het adres van het labo staat. Stuur het staal op.

Vul op het antwoordformulier zeker de datum in waarop u uw staal nam. Zonder ingevuld antwoordformulier kunnen wij uw staal niet onderzoeken.

Let op: dit antwoordformulier wordt automatisch verwerkt

- dit formulier mag daarom enkel gebruikt worden door de persoon wiens naam op het antwoordformulier voorgedrukt staat
- plak niets op het antwoordformulier
- gebruik enkel een blauwe of zwarte pen
- zet elke letter en cijfer binnen het vakje zodat de rand van het vakje niet geraakt wordt
- geef enkel een (huis)arts op met een adres in België

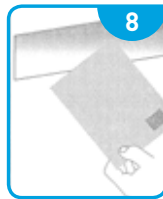

Stap 8: Stuur de bubbel-envelop zo snel mogelijk op. Een postzegel is niet nodig. Kan u uw staal niet meteen versturen? Bewaar het flesje dan maximum zeven dagen in de koelkast.